



Dispositivi medici

My Benefit Mask MED



MED

MASCHERINE CHIRURGICHE - TIPO IIR



50 PEZZI

10 PEZZI

Mascherina chirurgica 3 strati monouso / non-sterile

Produttore:

Xiamen Probtain Nonwoven Inc.
No. 6, Ji an Road, Tong An District,
Xiamen, Fujian, China 361100

 **My Benefit**®
il benessere della salute

Importatore:

My Benefit Srl
Via Giacomo Leopardi, 46/a - 41123 Modena MO
www.mybenefit.it info@mybenefit.it

My Benefit Mask



MED

MASCHERINE CHIRURGICHE - TIPO IIR

CARATTERISTICHE

Mascherine chirurgiche facciali ad uso medico - Tipo IIR non riutilizzabili, disponibili in confezione cartone da 50 o in buste da 10 pezzi.


Il loro uso è consigliato laddove non sia possibile adottare la distanza minima di sicurezza anti-contagio:

- *Nell'ambiente di lavoro;*
- *In ambienti affollati o ad uso pubblico;*
- *In ambiti sanitari ed ospedalieri;*

Utilizzate principalmente per creare una barriera tra la bocca e il naso di chi le indossa, le mascherine IIR possiedono una maggiore resistenza alla proiezione (spruzzi) di fluidi corporei sulla superficie esterna rispetto al tipo I o II.

Una volta usate, le mascherine monouso debbono essere immediatamente smaltite in un sacchettino di plastica ben chiuso all'interno del bidone della raccolta differenziate.

DETTAGLI TECNICI

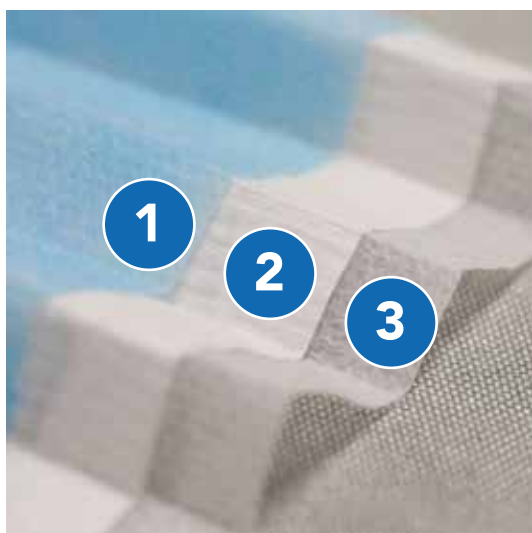

Materiale (3 strati):

- 1. Superficie esterna:** Polipropilene tessuto-non-tessuto 25 g/m²
- 2. Filtro:** Polipropilene melt-blown 25 g/m²
- 3. Superficie interna:** Polipropilene tessuto-non-tessuto 20 g/m²

Formato: Box (50 pezzi), Busta (10 pezzi);

Dimensioni: 17.5 * 9.5 cm

Tipo: Tipo II R - monouso / non sterile

Standard Filtrazione: EN 14683: 2019+AC2019

Progressivo di registrazione Dispositivo Medico: 1968967

Condizioni di conservazione: mantenere in condizione buie, secche e ben ventilate, lontano da fiamme libere e fonti di inquinamento.

Shelf life: 3 anni dalla data di produzione

FUNZIONI


Mascherine chirurgiche ad uso medico, testate per assicurare specifici livelli di protezione nei confronti della penetrazione di saliva ed altri fluidi biologici attraverso le mucose di naso e bocca. Le mascherine forniscono una protezione nei confronti della diffusione dell'influenza sia bloccando le goccioline di secrezioni respiratorie emesse dalle persone malate che le indossano, sia impedendo che le medesime goccioline o spruzzi di secrezioni o altri fluidi biologici raggiungano le mucose di naso e bocca.



EN 14683: 2019+AC2019 Tipo IIR
Conforme alla direttiva 93/42/CEE



E' un dispositivo medico.
Leggere le avvertenze e le istruzioni per l'uso.
Autorizzazione del 30/06/2020

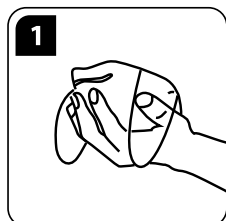My Benefit Mask**MED****MASCHERINE CHIRURGICHE - TIPO IIR****ISTRUZIONI PER L'USO**

1. Aprire la confezione ed estrarre la maschera, posizionando il clip nasale verso l'alto
2. Appoggiare la maschera sul volto, coprendo naso, bocca e mento, e tirare l'elastico alle orecchie
3. Aggiustare il clip nasale alla forma del naso
4. Aggiustare la posizione della mascherina per un'indossatura confortevole
5. Assicurarsi di Indossare la mascherina correttamente (lato esterno BLU, lato interno BIANCO)
Non toccare la superficie interna della mascherina con le mani.

INDICAZIONI

Prima di utilizzare la mascherina, lavare le mani con disinfettante, alcool o sapone. Apporre alla radice del naso, spingere la mascherina sul mento e aggiustare gli elastici dietro alle orecchie fino ad un'indossatura confortevole.

Se, durante l'uso, dovesse rendersi necessario rimuovere la maschera, evitare contatto con mani / naso / bocca e la superficie esterna della maschera, per evitare possibili contagi. Quando la si getta, ripiegarla rivolgendo l'esterno verso il centro e disporne nei rifiuti indifferenziati richiudendola dentro un sacchetto di plastica.

La maschera è monouso, non riutilizzabile o riciclabile. Mantenere in condizione buie, secche e ben ventilate, lontano da fiamme libere e fonti di inquinamento.

IMPORTANTE

La maschera è in grado di filtrare alcuni agenti contaminanti, ma un utilizzo scorretto può causare contagio e conseguente malattia, fino alla morte. Materiali in diretto contatto con la pelle possono causare una reazione allergica in certi individui ipersensibili.

My Benefit Mask



MED

MASCHERINE CHIRURGICHE - TIPO IIR

BLUE



Busta 10 pezzi



8 055519 881116

Conf. 50 pezzi



8 055519 881079

BLACK



Busta 10 pezzi



8 055519 881680

Conf. 50 pezzi



8 055519 881697

PINK



Busta 10 pezzi



8 055519 881703

Conf. 50 pezzi



8 055519 881673

VERDE



Busta 10 pezzi



8 055519 881628

Conf. 50 pezzi



8 055519 881833

5 COLORI ASSORTITI



Busta 10 pezzi



8 055519 881550

Conf. 50 pezzi



8 055519 881840